

수어 복약지도 시연 앱 사용 설명서

약봉투 OCR 기반 농인 대상 수어 복약지도 서비스
약사용 스마트패드 데모 — 압축 풀기부터 시연 마무리까지

배포 파일	KSL-sign-pharmacy-demo.zip (약 8.2MB)
실행 방법	압축 풀고 index.html 더블클릭
필요 환경	Windows PC · Mac · 태블릿 / Chrome 또는 Edge
인터넷	연결하지 않아도 동작합니다
문서 기준일	2026년 9월 21일

이 문서에 실린 모든 화면은 시연용 가상 데이터입니다. 실제 환자 정보나 처방이 아닙니다.

수어영상은 데모용 샘플이며 자막 내용과 일치하지 않습니다.

기획 · 개발: 케이엘큐브(KLcube) 전략기획실

목차

1 시작하기 전에 — 준비물과 확인 사항

2 압축 풀고 실행하기 — Windows · Mac

3 화면 구성 한눈에 보기 — 5단계 흐름

4 단계별 사용법 — 시작 화면부터 QR까지, 화면 캡처와 함께

5 약봉투 예시 6종으로 더 시연하기 — 잘 안 읽힌 경우 포함

6 실제 약봉투를 인쇄해 촬영 시연하기

7 화면 크기와 기기 —패드 · PC · 휴대전화

8 시연 진행 멘트 예시

9 문제가 생겼을 때

10 꼭 함께 알려야 하는 한계

준비물

항목	내용
파일	KSL-sign-pharmacy-demo.zip — 약 8.2MB. 수어영상 5개, 약봉투 예시 이미지, 이 설명서가 모두 들어 있습니다.
기기	Windows PC, Mac, 안드로이드 태블릿, 아이패드 모두 가능합니다.
브라우저	Chrome 또는 Edge 를 권장합니다. Internet Explorer에서는 동작하지 않습니다.
인터넷	필요하지 않습니다. 서버 없이 브라우저 안에서만 동작합니다.
설치	필요하지 않습니다. 프로그램을 설치하지 않고 파일을 열기만 합니다.

이 데모로 보여 드릴 수 있는 것

- 약봉투를 촬영하면 복약정보를 읽어오는 흐름
- 읽어온 내용을 **약사님이 확인하고 고치**는 안전 절차
- 약사님의 판단으로 **주의사항 안내**를 덧붙이는 기능
- 문장마다 수어영상과 한국어 자막이 함께 재생되는 방문자 화면
- 방문자가 집에서 48시간 동안 다시 볼 수 있는 QR 발급

미리 알아 두실 것

- 화면에 보이는 약국명·환자명·의약품명은 모두 **시연용 가상 데이터**입니다.
- 수어영상은 **시연용 샘플**이며 자막 내용과 일치하지 않습니다. 영상 아래에 그 안내가 작게 표시됩니다.
- 브라우저를 닫으면 진행 중이던 안내와 QR 정보가 사라집니다. 파일로 여는 데모의 특성입니다.

2 압축 풀고 실행하기

Windows 압축 풀기

1. **KSL-sign-pharmacy-demo.zip** 파일을 바탕화면이나 문서 폴더에 저장합니다.
2. 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 누릅니다.
3. **압축 풀기** 또는 **모두 압축 해제** 를 누릅니다.
Windows 11에서는 **모두 압축 해제** , Windows 10에서는 **압축 풀기** 로 표시됩니다.
4. 나타난 창에서 **압축 풀기** 버튼을 한 번 더 누릅니다. 위치는 그대로 두면 됩니다.
5. **KSL-sign-pharmacy-demo** 폴더가 만들어집니다. 그 폴더를 두 번 눌러 엽니다.

압축을 풀지 않고 ZIP 안에서 바로 열면 동작하지 않습니다

Windows는 ZIP 파일 안을 폴더처럼 보여 주지만, 그 상태에서 **index.html** 을 열면 수어영상과 약봉투 이미지를 찾지 못합니다. 반드시 압축을 먼저 풀어 주세요.

Mac 압축 풀기

KSL-sign-pharmacy-demo.zip 파일을 두 번 누르면 같은 위치에 폴더가 자동으로 만들어집니다.

폴더 안에 이런 파일들이 있습니다

- 📁 **KSL-sign-pharmacy-demo**
 - 🌐 **index.html** ← 이 파일을 두 번 누르면 실행됩니다
 - 📄 **HOW-TO-START.txt** — 시연 순서 요약 메모 (한글)
 - 📄 **USER-MANUAL.pdf** — 이 설명서
 - 📁 **avatar-samples** — 수어영상 샘플 5개
 - 📁 **samples** — 약봉투 예시 이미지 · 인쇄용 파일

index.html만 따로 옮기지 마세요

파일 이름을 영문으로 둔 것은 일부러입니다. 한글 파일명은 압축 파일 규격상 Windows에서 깨져 보일 수 있어, 어느 PC에서나 그대로 풀리도록 영문으로 통일했습니다.

index.html 은 같은 폴더에 있는 **avatar-samples** 와 **samples** 폴더를 함께 사용합니다. 바탕화면에 **index.html** 만 꺼내 두면 수어영상과 약봉투 이미지가 나오지 않습니다. **폴더 전체를 통째로 보관하고 전달해 주세요.**

실행하기

1. 폴더 안의 **index.html** 을 두 번 누릅니다.
2. 기본 브라우저로 화면이 열립니다.
3. Internet Explorer로 열렸다면 **index.html** 을 오른쪽 버튼으로 누르고 **연결 프로그램** → **Chrome** 또는 **Edge** 를 선택해 주세요.

전체화면으로 시연하시면 더 좋습니다

브라우저에서 **F11** (Windows) 또는 **^*F** (Mac)를 누르면 주소창이 사라져 실제 앱처럼 보입니다. 되돌릴 때도 같은 키를 누릅니다.

이 데모는 다음 → 다음으로 이어지는 한 줄 흐름입니다. 화면 위쪽에 지금 어느 단계인지 항상 표시됩니다.



화면 이동 버튼

버튼	누르면 어디로 가는지
← 이전으로	바로 앞 단계로 돌아갑니다.
✕ 방문자 화면 닫기	방문자에게 보여주던 어두운 전체화면을 닫고 약사 화면 으로 돌아옵니다. 처음 화면으로 가는 버튼이 아닙니다.
처음 화면으로	맨 처음 화면(대시보드)으로 돌아옵니다.
다른 약봉투 예시 해보기	예시 목록으로 가서 다음 사례를 이어서 시연합니다.

색으로 표시되는 확인 상태

표시	뜻	약사님이 하실 일
✓ 잘 읽혔어요	또렷하게 읽혔습니다 (정확도 90% 이상)	그대로 진행
! 한 번 확인	읽었지만 한 번 봐 주셔야 합니다 (75% 이상)	약봉투와 비교
✕ 다시 확인	잘 읽지 못했습니다 (75% 미만)	고쳐야 다음으로 넘어갑니다
✎ 직접 입력	아예 읽지 못했습니다	직접 입력해야 넘어갑니다
✓ 내가 확인함	약사님이 직접 확인하거나 고쳤습니다	완료

시작 화면

데모계정으로 바로 시작 을 누릅니다. 시연에서는 아이디·비밀번호를 입력하지 않습니다.

대한약사회 공용플랫폼 데모

약봉투를 찍으면 수어로 복약안내

약봉투를 촬영하면 복약정보를 읽어 드립니다. 약사님이 확인하고 보낸 내용만 농인 방문자에게 수어와 자막으로 전달되고, 방문자는 48시간 동안 QR로 다시 볼 수 있습니다.

△ 시연용 예시 자료입니다. 실제 처방이나 의약품 정보가 아닙니다.

약사 아이디

demo

비밀번호

....

로그인

데모계정으로 바로 시작

시연용 화면이라 아이디·비밀번호는 확인하지 않습니다. 방문자는 가입할 필요가 없고, 개인정보도 저장하지 않습니다.

시작 화면. 실제 서비스에서는 약국 계정으로 로그인합니다. 시연에서는 아래 버튼 하나로 바로 들어갑니다.

처음 화면(대시보드)

 **새 복약안내 시작** 을 누르면 1단계로 넘어갑니다. 아래 두 버튼은 약봉투 예시를 미리 보거나 인쇄할 때 씁니다.

농인 방문자를 위한 새 수어 복약안내를 시작합니다

약봉투가 없는 자리에서는 준비된 약봉투 예시로 촬영 단계를 대신 보여드릴 수 있습니다.

새 복약안내

방문자에게 수어 안내가 필요한지 여쭙본 뒤 시작해 주세요. 방문자 가입은 필요하지 않습니다.

 새 복약안내 시작

이렇게 보여주세요

1. 약봉투 스캔 화면을 보여주며 "촬영하면 이렇게 읽어옵니다"라고 설명
2. 오른쪽에서 **약봉투 예시**를 골라 읽은 내용 확인
3. 빨강·노랑 항목 확인 → 안내 문장 고르기 → 확인 항목 체크 → 보내기
4. 수어 설명 영상 보기로 영상을 확인한 뒤 패드를 방문자에게 보여주기
5. 안내 마치고 48시간 다시보기 QR 만들기

약봉투 예시 목록 보기

약봉투 예시 인쇄하기

이 서비스는 약사님이 확인하고 보낸 내용만 방문자에게 전달합니다. 병명을 짐작하거나 복용법을 스스로 만들지 않습니다. 수어 안내만으로 복약지도 의무가 대신되지는 않습니다.

처음 화면. 시연 중 언제든 **처음 화면으로** 버튼으로 이 화면에 돌아올 수 있습니다.

1단계 약봉투 읽기

약봉투를 카운터에 놓고 촬영하면 **한 번에 먹는 양 · 하루 몇 번 · 며칠 동안 · 언제 먹는지**를 읽어옵니다. 시연에서는 이미 읽은 결과를 화면에 띄워 보여 드립니다.

- 왼쪽 — 약봉투 스캔 화면과 **약봉투에서 읽은 내용** 목록
- 오른쪽 — 앞으로의 진행 순서 안내

확인하셨으면 **안내 내용 확인하기 →** 를 누릅니다.

수어 복약지도

서울 열린약국

△ 시연용 예시

약봉투 읽기 예시

수어영상 예시

1 약봉투 읽기

2 내용 확인

3 안내 문장

4 수어 안내

5 완료

약봉투를 촬영하면 복약정보를 읽어옵니다

약봉투를 카운터에 놓고 촬영하면 한 번에 먹는 양과 하루 몇 번, 며칠 동안, 언제 먹는지를 자동으로 읽어옵니다. 아래는 감기 · 일반 약봉투 예시로 보여드리는 결과입니다.

약봉투 스캔 화면

감기

△ 시연용 약봉투 스캔 결과(예시)

서울 열린약국

환자 김OO

조제일 2026년 9월 21일

시연용 A정 시연용 B캡슐 시연용 C정

1회 복용량
1회 1포

복용기간
3일분

1일 복용횟수
1일 3회

복용시점
식후 30분

주의 줄음이 올 수 있음

※ 시연용 가상 약봉투입니다. 실제 의약품이나 처방이 아닙니다.
대한약사회 공용플랫폼 수어 복약지도 데모

약봉투에서 읽은 내용

한 번에 먹는 양

1포 ✓ 잘 읽혔어요 97%

하루 몇 번

3번 ✓ 잘 읽혔어요 95%

며칠 동안

3일 ! 한 번 확인 82%

언제 먹는지

식후 30분 ✓ 잘 읽혔어요 91%

✓ 필요한 복약정보를 모두 읽었습니다. 다음 화면에서 내용을 확인해 주세요.

▶ 실제 약봉투 사진으로 해보기

이렇게 진행됩니다

1. 읽은 내용 확인 — 약봉투와 비교해 고칠 곳을 고칩니다

2. 안내 문장 고르기 — 방문자에게 보여줄 문장을 정합니다

3. 수어영상 보기 — 문장마다 수어영상과 자막이 함께 재생됩니다

4. 안내 마치기 — 48시간 동안 다시 볼 수 있는 QR을 드립니다

안내 내용 확인하기 →

다른 약봉투 예시로 바꾸기

약봉투에 적힌 내용만 사용합니다. 병명으로 복용법을 짐작하거나 없는 정보를 만들지 않습니다.

약봉투 1장 · 감기 예시

안내 내용 확인하기 →

이 서비스는 약사님이 확인하고 보낸 내용만 방문자에게 전달합니다. 병명을 짐작하거나 복용법을 스스로 만들지 않습니다. 수어 안내만으로 복약지도 의무가 대신되지는 않습니다.

1단계. 읽은 항목마다 **잘 읽혔어요 97%**처럼 정확도가 함께 표시됩니다. 아래쪽 **실제 약봉투 사진으로 해보기**를 펼치면 촬영·사진 불러 오기로 진행할 수 있습니다(6장 참고).

2단계 내용 확인

읽어온 내용을 약봉투와 **약사님이 직접 비교**하는 화면입니다. 이 서비스의 안전장치가 들어 있는 단계입니다.

- 빨간색 · 노란색으로 표시된 항목을 약봉투와 비교합니다.
- 다른 **입력창에서 바로 고칩니다**. 고치면 ✓ **내가 확인함**으로 바뀝니다.
- 빨간색 항목이 하나라도 남아 있으면 다음으로 넘어갈 수 없습니다.

모두 확인되면 **다음 · 안내 문장 만들기 →** 가 열립니다.

수어 복약지도

서울 열린약국

시연용 예시

약봉투 읽기 예시

수어영상 예시

✓ 약봉투 읽기

2 내용 확인

3 안내 문장

4 수어 안내

5 완료

읽은 내용을 확인해 주세요

빨간색·노란색 항목을 약봉투와 비교해 주세요. 항목을 누르면 약봉투에서 그 부분을 표시해 드리고, 모든 값은 직접 고칠 수 있습니다.

일반 약봉투

가미

✓ 잘 읽혔어요

사진 상태 · 효험 8% · 빛 반사 4%

서울 열린약국

이름은 가미니다

조제일 2026년 9월 21일

시연용 A정 시연용 B캡슐 시연용 C정

1회 복용량

1회 1포

복용기간

3일분

1일 복용횟수

1일 3회

복용시점

식후 30분

주의 줄음이 올 수 있음

※ 시연용 가상 약봉투입니다. 실제 의약품이나 처방이 아닙니다.
대한약사회 공공플랫폼 수어 복약지도 데모

▶ 약봉투에서 읽은 글자 보기

정해진 시간에 먹는 약

시연용 A정, 시연용 B캡슐, 시연용 C정

약품명

✓ 잘 읽혔어요 94%

약봉투와 같아요

시연용 A정, 시연용 B캡슐, 시연용 C정

약봉투 표기 시연용 A정 시연용 B캡슐 시연용 C정 → 시연용 A정, 시연용 B캡슐, 시연용 C정

한 번에 먹는 양 *

✓ 잘 읽혔어요 97%

약봉투와 같아요

1

약봉투 표기 1회 1포

단위 (정·포 등) *

✓ 잘 읽혔어요 97%

약봉투와 같아요

포

약봉투 표기 포

하루 몇 번 *

✓ 잘 읽혔어요 95%

약봉투와 같아요

3

약봉투 표기 1일 3회

머칠 동안 *

! 한 번 확인 82%

약봉투와 같아요

3

약봉투 표기 3일분 → 3일

언제 먹는지 *

✓ 잘 읽혔어요 91%

약봉투와 같아요

식후 30분

약봉투 표기 식후 30분

확인할 항목

! 머칠 동안을(를) 약봉투와 한 번 비교해 주세요.

✓ 모두 확인되었습니다

← 이전으로

다음 · 안내 문장 만들기 →

이 서비스는 약사님이 확인하고 보낸 내용만 방문자에게 전달합니다. 병명을 짐작하거나 복용법을 스스로 만들지 않습니다. 수어 안내만으로 복약지도 의무가 대신되지는 않습니다.

2단계. 화면 아래 표시줄에 **확인이 필요한 항목 n개** 또는 **모두 확인되었습니다**가 나옵니다.

수어 복약지도
서울 열린약국
시연용 예시
약봉투 읽기 예시
수어영상 예시

✓ 약봉투 읽기
2 내용 확인
3 안내 문장
4 수어 안내
5 완료

※ 시연용 가상 약봉투입니다. 실제 의약품이나 처방이 아닙니다.
대한약사회 공공플랫폼 수어 복약지도 데모

▶ 약봉투에서 읽은 글자 보기

포

약봉투 표기 포

하루 몇 번 *

✓ 잘 읽혔어요 95%
약봉투와 같아요

3

약봉투 표기 1일 3회

며칠 동안 *

! 한 번 확인 82%
약봉투와 같아요

3

약봉투 표기 3일분 → 3일

연제 먹는지 *

✓ 잘 읽혔어요 91%
약봉투와 같아요

식후 30분

약봉투 표기 식후 30분

확인할 항목

! 며칠 동안을(를) 약봉투와 한 번 비교해 주세요.

✓ 모두 확인되었습니다

← 이전으로
다음 · 안내 문장 만들기 →

항목을 누르면 약봉투에서 그 위치를 표시해 줍니다. 어디를 보고 읽은 값인지 바로 확인할 수 있어, 약봉투와 대조하기 쉽습니다.

3단계 ① 만들어진 안내 문장 확인

읽어온 복약정보로 안내 문장이 자동으로 만들어집니다. 모든 문장이 **포함하기로** 켜져 있습니다.

- **순서 바꾸기** — 문장의 **↑ 위로** / **↓ 아래로** 를 누릅니다.
- **빼기** — ☒ **포함하기** 체크를 해제하면 **제외**로 바뀌고 재생되지 않습니다.
- 오른쪽에 **방문자에게 보이는 자막**이 실시간으로 미리 보입니다.

수어 복약지도 서울 열린약국 시연용 예시

약봉투 읽기 예시 수어영상 예시

✓ 약봉투 읽기

✓ 내용 확인

3 안내 문장

4 수어 안내

5 완료

방문자에게 보여줄 문장을 정해 주세요

모든 문장이 포함하기로 켜져 있습니다. 순서를 바꾸거나 빼고 싶은 문장의 체크를 해제하고, 덧붙일 주의사항이 있으면 추가해 주세요.

1 만들어진 안내 문장을 확인해 주세요

순서 바꾸기 — 문장의 위로 / 아래로 누르세요

빼기 — 포함하기 체크를 해제하면 제외되어 재생되지 않습니다

1 안내 시작 ★ 꼭 필요 표준 안내 문구 ↑ 위로 ↓ 아래로 ☒ 포함하기

지금부터 약을 먹는 방법을 안내하겠습니다.

▶ 수어로 표현하는 순서 보기

2 복용량·횟수 ★ 꼭 필요 약봉투에서 읽음 ↑ 위로 ↓ 아래로 ☒ 포함하기

하루 3번, 한 번에 1포씩, 3일 동안 드세요.

▶ 수어로 표현하는 순서 보기

3 복용시점 ★ 꼭 필요 약봉투에서 읽음 ↑ 위로 ↓ 아래로 ☒ 포함하기

아침, 점심, 저녁 식사 후 30분에 드세요.

▶ 수어로 표현하는 순서 보기

4 복용기간 선택 가능 약봉투에서 읽음 ↑ 위로 ↓ 아래로 ☒ 포함하기

이 약은 3일 동안 드세요.

▶ 수어로 표현하는 순서 보기

5 주의사항 선택 가능 표준 안내 문구 ↑ 위로 ↓ 아래로 ☒ 포함하기

이 약은 졸릴 수 있습니다.

▶ 수어로 표현하는 순서 보기

6 안내 종료 ★ 꼭 필요 표준 안내 문구 ↑ 위로 ↓ 아래로 ☒ 포함하기

설명을 다시 보고 싶으시면 QR을 촬영해서 집에서도 보실 수 있습니다. (48시간 동안 유효)

▶ 수어로 표현하는 순서 보기

2 덧붙일 주의사항이 있으면 추가해 주세요 필요할 때만

💬 덧붙일 주의사항이 있으신가요?

졸음·운전, 소화, 술·병용, 보관, 이상반응처럼 약사님의 판단으로 덧붙이는 안내를 문장으로 추가할 수 있습니다. 추가한 문장도 수어영상과 자막으로 함께 재생됩니다.

덧붙일 안내가 없으면 그냥 다음으로 넘어가면 됩니다.

+ 주의사항 안내 추가하기

방문자에게 보이는 자막 6문장

1 / 6

지금부터 약을 먹는 방법을 안내하겠습니다.

2 / 6

하루 3번, 한 번에 1포씩, 3일 동안 드세요.

3 / 6

아침, 점심, 저녁 식사 후 30분에 드세요.

4 / 6

이 약은 3일 동안 드세요.

5 / 6

이 약은 졸릴 수 있습니다.

6 / 6

설명을 다시 보고 싶으시면 QR을 촬영해서 집에서도 보실 수 있습니다. (48시간 동안 유효)

☐ 약봉투 내용과 위 문장을 확인했습니다

▶ 무엇을 확인하는 건가요?

확인하시면 수어영상이 만들어지고, 방문자 화면으로 전달됩니다.

보낼 문장 6개 (전체 6개 중)

← 이전으로

수어영상 보기 →

이 서비스는 약사님이 확인하고 보낸 내용만 방문자에게 전달합니다. 병명을 짐작하거나 복용법을 스스로 만들지 않습니다. 수어 안내만으로 복약지도 의무가 대신되지는 않습니다.

3단계 ①. 왼쪽이 문장 목록, 오른쪽이 방문자에게 보일 자막 미리보기입니다. 목록 아래에 ② 주의사항 추가 영역이 있습니다.

수어 복약지도 시연 앱 사용 설명서 · KLCube

12

3단계 ② 덧붙일 주의사항 추가 — 필요할 때만

약봉투에 적힌 기본 복용정보 외에, 성분이나 조제 내용을 보고 **약사님이 판단해 덧붙이는 안내**를 문장으로 추가할 수 있습니다. 문장 목록 아래 점선 상자의 **+ 주의사항 안내 추가하기**를 누릅니다.

일반적인 안내만 하실 때는 이 단계를 건너뛰셔도 됩니다

며칠 동안, 하루 몇 번, 식전·식후 정도만 안내하시는 경우는 ①까지로 충분합니다. 이 기능은 **중요한 주의사항을 자세히 덧붙이실 때** 쓰는 기능입니다.

☞ 주의사항 안내 추가 약사 판단으로 덧붙이는 안내

닫기

성분이나 조제 내용을 보고 덧붙이실 안내를 찾아 추가하세요. 여러 개 추가할 수 있고, 추가한 문장도 수어영상과 자막으로 함께 재생됩니다.

증상이나 상황으로 찾기 (예: 졸음, 소화, 열, 보관)

전체



졸음 · 운전



소화 · 위장



열 · 통증



항생제



술 · 함께 먹지 않기



먹는 방법



보관



이상반응



시간을 놓쳤을 때

27개 문장

이 약은 졸리 수 있습니다. 운전이나 위험한 기계 조작을 피해 주세요

추가

패널 위쪽 — 검색창과 카테고리 버튼. 증상이나 상황을 입력해 찾거나, 카테고리 9종에서 골라 들어갑니다.

이 약은 졸릴 수 있습니다. 운전이나 위험한 기계 조작을 피해 주세요.

추가

저녁에 먹는 약은 특히 졸릴 수 있습니다.

추가

많이 졸리면 약사에게 말씀해 주세요.

추가

속이 쓰릴 수 있어 위를 보호하는 약이 함께 들어 있습니다.

추가

속이 불편하면 음식을 조금 먹고 약을 드세요.

추가

찾는 안내가 없으면 직접 입력

직접 쓰신 문장은 약사님이 쓴 문장으로 표시되고, 그 문장에 맞는 수어영상을 새로 만들어 붙입니다.

예: 이 약은 혈압약과 같이 드시면 어지러울 수 있습니다.

 수어영상 만들어 추가하기

패널 아래쪽 — 문장 목록과 직접 입력란. 문장 오른쪽 **추가**를 누르면 안내 문장에 들어갑니다. 찾는 안내가 없으면 맨 아래에 직접 적습니다.

방법 1 — 카테고리에서 고르기

카테고리 9종 중 하나를 누르면 그 주제의 문장이 나옵니다. 문장 오른쪽 **추가**를 누르면 안내 문장에 들어갑니다.

카테고리	카테고리	카테고리
 졸음 · 운전	 소화 · 위장	 열 · 통증
 항생제	 술 · 함께 먹지 않기	 먹는 방법
 보관	 이상반응	 시간을 놓쳤을 때

전체 27개 문장이 준비되어 있습니다.

성분이나 조제 내용을 보고 덧붙이실 안내를 찾아 추가하세요. 여러 개 추가할 수 있고, 추가한 문장도 수어영상과 자막으로 함께 재생됩니다.

증상이나 상황으로 찾기 (예: 졸음, 소화, 열, 보관)

전체

🛌 졸음 · 운전

🍽️ 소화 · 위장

🔥 열 · 통증

💊 항생제

🚫 술 · 함께 먹지 않기

🥛 먹는 방법

📦 보관

⚠️ 이상반응

🕒 시간을 놓쳤을 때

3개 문장

이 약은 졸릴 수 있습니다. 운전이나 위험한 기계 조작을 피해 주세요.

추가

저녁에 먹는 약은 특히 졸릴 수 있습니다.

추가

많이 졸리면 약사에게 말씀해 주세요.

추가

찾는 안내가 없으면 직접 입력

직접 쓰신 문장은 약사님이 쓴 문장으로 표시되고, 그 문장에 맞는 수어영상을 새로 만들어 붙입니다.

예: 이 약은 혈압약과 같이 드시면 어지러울 수 있습니다.

👉 수어영상 만들어 추가하기

졸음 · 운전 카테고리를 누른 모습. 해당 주제의 문장만 보입니다.

방법 2 — 검색으로 찾기

검색창에 졸음, 소화, 열, 보관, 술처럼 증상이나 상황을 입력하면 카테고리와 관계없이 전체에서 찾아 줍니다.

성분이나 조제 내용을 보고 덧붙이실 안내를 찾아 추가하세요. 여러 개 추가할 수 있고, 추가한 문장도 수어영상과 자막으로 함께 재생됩니다.

소화

전체

😴 졸음 · 운전

🍲 소화 · 위장

🔥 열 · 통증

💊 항생제

🚫 술 · 함께 먹지 않기

🥛 먹는 방법

📦 보관

⚠️ 이상반응

🕒 시간을 놓쳤을 때

3개 문장

속이 쓰릴 수 있어 위를 보호하는 약이 함께 들어 있습니다.

추가

속이 불편하면 음식을 조금 먹고 약을 드세요.

추가

소화가 잘 안 되면 식사 후에 드세요.

추가

찾는 안내가 없으면 직접 입력

직접 쓰신 문장은 약사님이 쓴 문장으로 표시되고, 그 문장에 맞는 수어영상을 새로 만들어 붙입니다.

예: 이 약은 혈압약과 같이 드시면 어지러울 수 있습니다.

👉 수어영상 만들어 추가하기

“소화”로 검색한 결과. 검색 중에는 카테고리 선택을 무시하고 전체에서 찾습니다.

☞ 주의사항 안내 추가 약사 판단으로 덧붙이는 안내

닫기

성분이나 조제 내용을 보고 덧붙이실 안내를 찾아 추가하세요. 여러 개 추가할 수 있고, 추가한 문장도 수어영상과 자막으로 함께 재생됩니다.

증상이나 상황으로 찾기 (예: 졸음, 소화, 열, 보관)

전체



졸음 · 운전



소화 · 위장



열 · 통증



항생제



술 · 함께 먹지 않기



먹는 방법



보관



이상반응



시간을 놓쳤을 때

3개 문장

이 약은 졸릴 수 있습니다. 운전이나 위험한 기계 조작을 피해 주세요.

✓ 추가됨

저녁에 먹는 약은 특히 졸릴 수 있습니다.

추가

많이 졸리면 약사에게 말씀해 주세요.

추가

찾는 안내가 없으면 직접 입력

직접 쓰신 문장은 약사님이 쓴 문장으로 표시되고, 그 문장에 맞는 수어영상을 새로 만들어 붙입니다.

예: 이 약은 혈압약과 같이 드시면 어지러울 수 있습니다.



수어영상 만들어 추가하기

추가한 직후. 위쪽에 안내 문장에 추가했습니다 알림이 뜨고, 추가한 문장은 목록에서 초록색 **추가됨**으로 표시됩니다. 여러 개 추가할 수 있습니다.

방법 3 — 찾는 안내가 없으면 직접 입력

패널 맨 아래 찾는 안내가 없으면 직접 입력란에 문장을 적고 수어영상 만들어 추가하기 를 누릅니다.

🗨️ 주의사항 안내 추가 약사 판단으로 덧붙이는 안내

닫기

성분이나 조제 내용을 보고 덧붙이실 안내를 찾아 추가하세요. 여러 개 추가할 수 있고, 추가한 문장도 수어영상과 자막으로 함께 재생됩니다.

증상이나 상황으로 찾기 (예: 졸음, 소화, 열, 보관)

전체



졸음 · 운전



소화 · 위장



열 · 통증



항생제



술 · 함께 먹지 않기



먹는 방법



보관



이상반응



시간을 놓쳤을 때

3개 문장

이 약은 졸릴 수 있습니다. 운전이나 위험한 기계 조작을 피해 주세요.

✓ 추가됨

저녁에 먹는 약은 특히 졸릴 수 있습니다.

추가

많이 졸리면 약사에게 말씀해 주세요.

추가

찾는 안내가 없으면 직접 입력

직접 쓰신 문장은 약사님이 쓴 문장으로 표시되고, 그 문장에 맞는 수어영상을 새로 만들어 붙입니다.

이 약은 혈압약과 같이 드시면 어지러울 수 있습니다.



수어영상 만들어 추가하기

직접 입력. 최대 120자까지 적을 수 있습니다.

☞ 주의사항 안내 추가

약사 판단으로 덧붙이는 안내

닫기

성분이나 조제 내용을 보고 덧붙이실 안내를 찾아 추가하세요. 여러 개 추가할 수 있고, 추가한 문장도 수어영상과 자막으로 함께 재생됩니다.

증상이나 상황으로 찾기 (예: 졸음, 소화, 열, 보관)

전체



졸음 · 운전



소화 · 위장



열 · 통증



항생제



술 · 함께 먹지 않기



먹는 방법



보관



이상반응



시간을 놓쳤을 때

🔍 “이 약은 혈압약과 같이 드시면 어지러울 수 있습니다.” 수어영상을 만들고 있습니다...

3개 문장

이 약은 졸릴 수 있습니다. 운전이나 위험한 기계 조작을 피해 주세요.

✓ 추가됨

저녁에 먹는 약은 특히 졸릴 수 있습니다.

추가

많이 졸리면 약사에게 말씀해 주세요.

추가

찾는 안내가 없으면 직접 입력

직접 쓰신 문장은 약사님이 쓴 문장으로 표시되고, 그 문장에 맞는 수어영상을 새로 만들어 붙입니다.

이 약은 혈압약과 같이 드시면 어지러울 수 있습니다.



수어영상 만들어 추가하기

수어영상을 만드는 중. 입력한 문장에 맞는 수어영상을 만든다는 표시가 나옵니다. 실제 서비스에서는 KLcube 아바타가 그 문장의 수어를 생성합니다.

7 약사 입력 선택 가능 직접 입력  약사님이 쓴 문장

↑ 위로

↓ 아래로

☒ 포함하기

이 약은 혈압약과 같이 드시면 어지러울 수 있습니다.

▶ 수어로 표현하는 순서 보기

직접 쓰신 문장에는  약사님이 쓴 문장 표시가 붙습니다. 검수된 표준 문구와 구분됩니다.

1 / 8

지금부터 약을 먹는 방법을 안내하겠습니다.

2 / 8

하루 3번, 한 번에 1포씩, 3일 동안 드세요.

3 / 8

아침, 점심, 저녁 식사 후 30분에 드세요.

4 / 8

이 약은 3일 동안 드세요.

5 / 8

이 약은 졸릴 수 있습니다.

6 / 8

이 약은 졸릴 수 있습니다. 운전이나 위험한 기계 조작을 피해 주세요.

7 / 8

이 약은 혈압약과 같이 드시면 어지러울 수 있습니다.

8 / 8

설명을 다시 보고 싶으시면 QR을 촬영해서 집에서도 보실 수 있습니다. (48시간 동안 유효)

약봉투 내용과 위 문장을 확인했습니다


▶ 무엇을 확인하는 건가요?

확인하시면 수어영상이 만들어지고, 방문자 화면으로 전달됩니다.

추가가 끝난 모습 — 오른쪽 자막 미리보기. 고른 문장과 직접 쓴 문장이 모두 방문자에게 보일 자막에 들어가 있습니다. 4단계에서 이 순서대로 재생됩니다.

확인 체크 — 방문자에게 보내기 전 마지막 관문

오른쪽 약봉투 내용과 위 문장을 확인했습니다를 체크해야 다음으로 넘어갑니다. 체크하지 않고 🙌 수어영상 보기 → 를 누르면 안내창이 뜹니다.

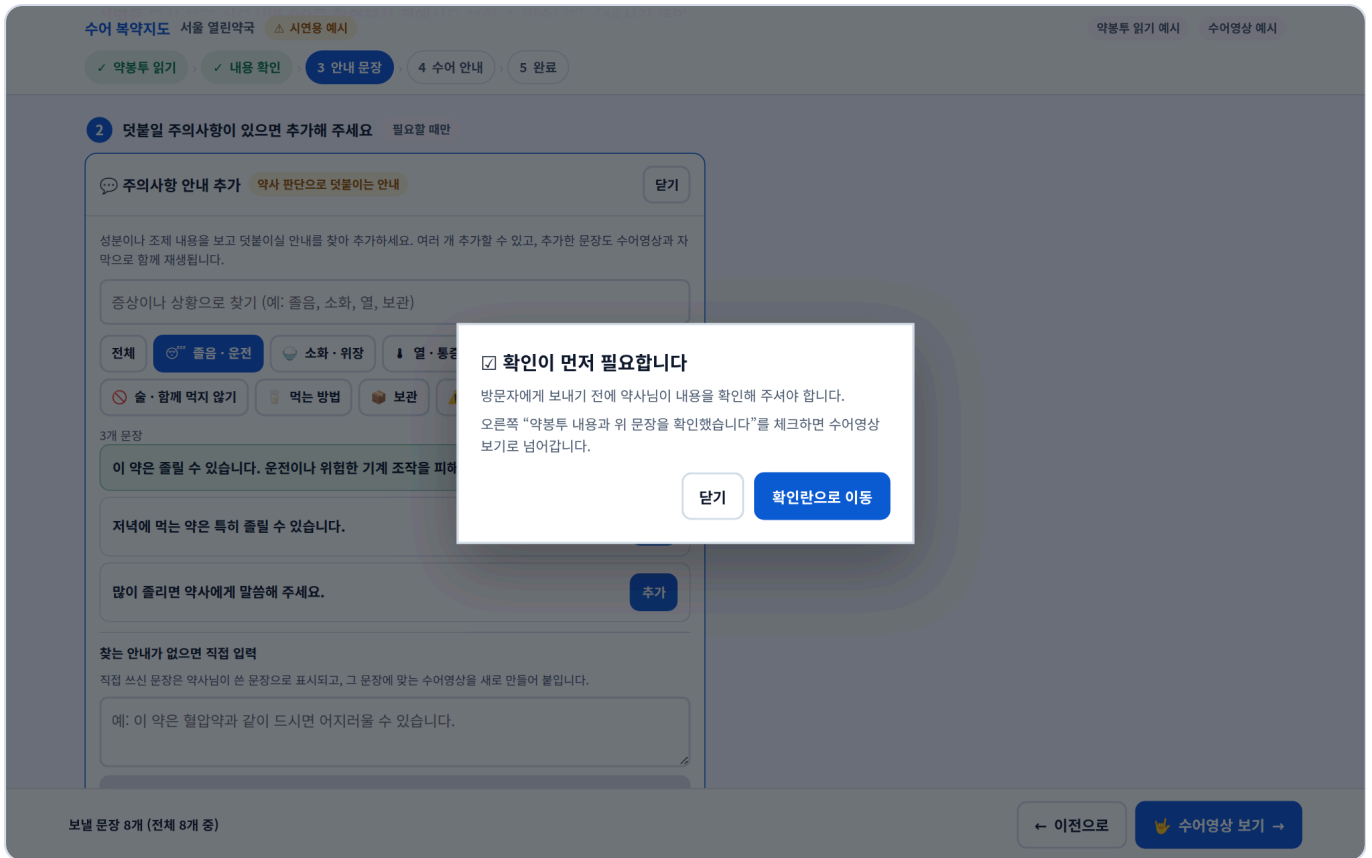


확인이 먼저 필요합니다. 확인란으로 이동을 누르면 체크란으로 화면이 이동하고 파란 테두리로 강조됩니다.

시연 멘트

“약사가 확인하지 않은 내용은 방문자에게 절대 전달되지 않습니다. 이 체크가 마지막 관문입니다.”

4단계 수어 안내

방문자에게 보여 드리는 **어두운 전체화면**으로 바뀝니다. 약사님이 먼저 내용을 확인하신 뒤, 들고 계신 패드를 방문자에게 보여 주세요.

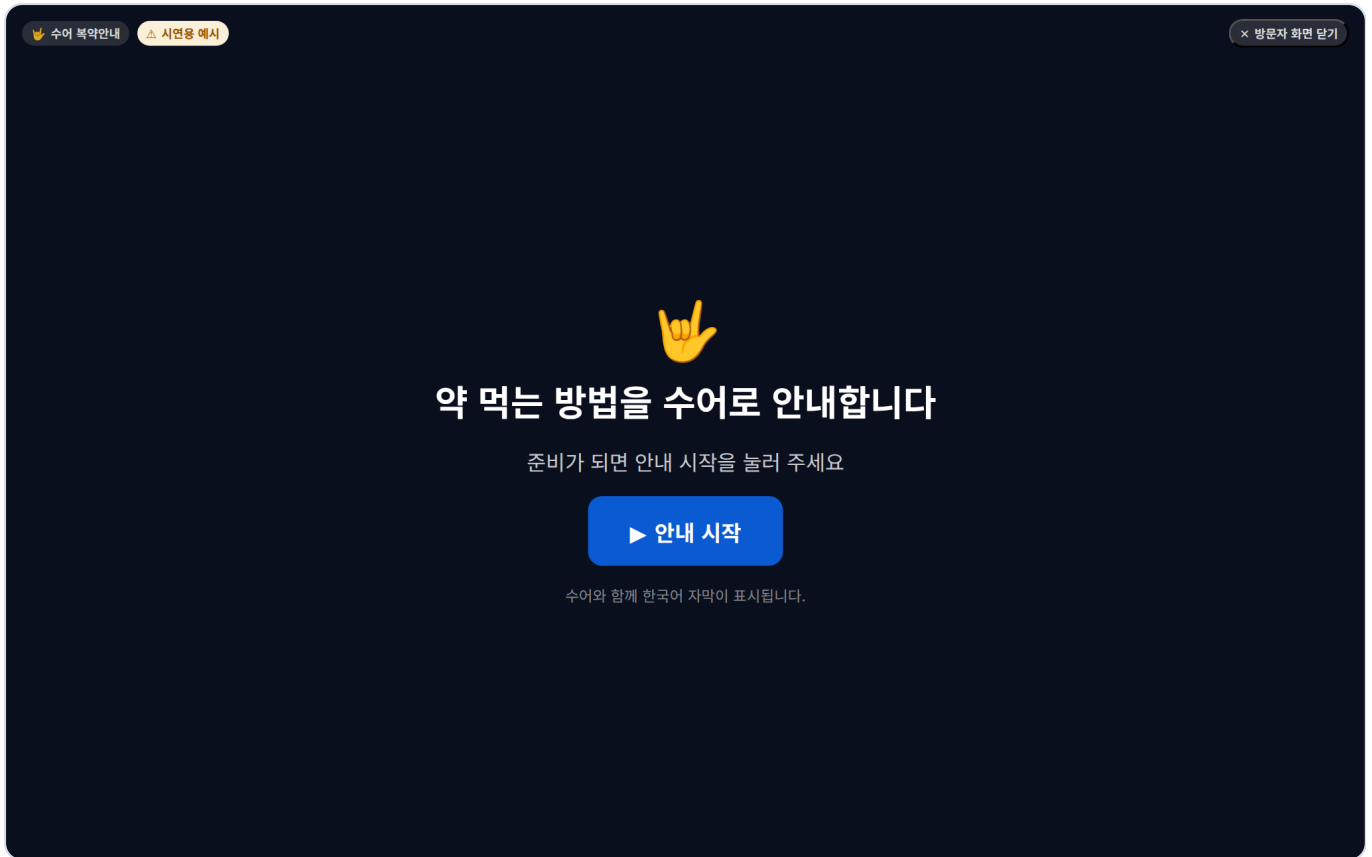

준비 화면. ▶ 안내 시작을 누르면 재생됩니다.




재생 중. 문장마다 수어영상과 큰 한국어 자막이 함께 나옵니다. 아래 진행바로 어디까지 왔는지 보이고, **n / n 문장**으로 남은 문장 수를 알 수 있습니다.

재생 조작 6가지

버튼	기능
일시정지	잠시 멈춥니다. 다시 누르면 이어서 재생됩니다.
⏮ 처음부터	첫 문장부터 다시 재생합니다.
◀ 이전 문장	앞 문장으로 돌아갑니다.
다음 문장 ▶	다음 문장으로 넘어갑니다.
🐢 천천히	재생 속도를 늦춥니다. 방문자가 따라오기 어려울 때 씁니다.
🏁 안내 마치기	안내를 끝내고 5단계 완료 화면으로 갑니다.

영상이 바로 시작됩니다

화면을 열 때 수어영상을 미리 받아 두기 때문에 **안내 시작**과 **다음 문장**에서 기다리지 않습니다. 영상이 준비되는 동안에는 자막과 진행바도 함께 기다려, 자막이 영상보다 앞서 나가지 않습니다.

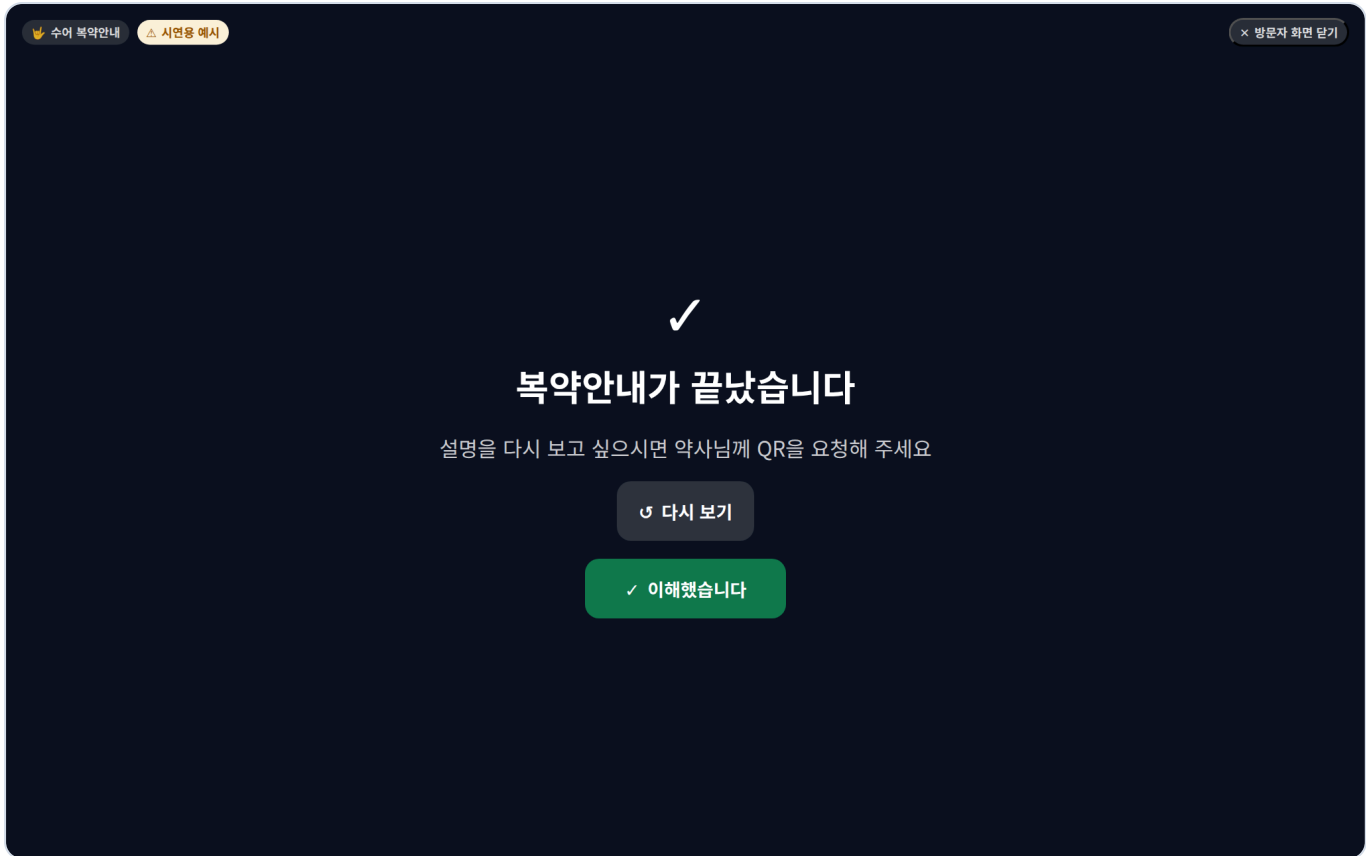

마지막 문장이 끝나면 이 화면으로 자동 전환됩니다. 방문자가 **다시 보기**로 처음부터 다시 볼 수 있고, **✓ 이해했습니다**를 누르면 약사님 화면에 표시됩니다.

5단계 완료 — 48시간 다시보기 QR

방문자 화면 우측 위 **× 방문자 화면 닫기** 또는 **🚩 안내 마치고**로 약사 화면에 돌아온 뒤,
안내 마치고 다시보기 QR 만들기를 누릅니다.

✓ 약봉투 읽기 > ✓ 내용 확인 > ✓ 안내 문장 > ✓ 수어 안내 > **5 완료**

안내를 마쳐 주세요

안내 마치기를 누르면 방문자가 다시 볼 수 있는 QR을 만들어 드립니다.

안내를 마치면 방문자가 다시 볼 수 있는 QR을 만들어 드립니다.

8문장을 보여드렸습니다.

수어 설명 영상 보기

안내 마치고 다시보기 QR 만들기

이 서비스는 약사님이 확인하고 보낸 내용만 방문자에게 전달합니다. 병명을 짐작하거나 복용법을 스스로 만들지 않습니다. 수어 안내만으로 복약지도 의무가 대신되지는 않습니다.

QR을 만들기 전 화면. 아래 버튼을 누르면 QR이 만들어집니다.

✓ 약봉투 읽기 > ✓ 내용 확인 > ✓ 안내 문장 > ✓ 수어 안내 > **5 완료**

이 QR을 방문자에게 보여 주세요

휴대전화로 촬영하면 집에서도 같은 안내를 다시 볼 수 있습니다.



48시간 동안 다시 볼 수 있습니다

2026년 09월 23일 14시 01분까지

약봉투 사진과 방문자 개인정보는 저장하지 않습니다. 48시간이 지나면 안내 내용도 자동으로 지워집니다.

다시보기 화면 열어보기

QR 사용 중지

파일로 열어 시연할 때는 QR 주소가 이 컴퓨터 경로여서 휴대전화로 스캔되지 않습니다. 다시보기 화면 열 어보기로 같은 화면을 보여주세요.

수어영상 다시 보기

다른 약봉투 예시 해보기 →

이 서비스는 약사님이 확인하고 보낸 내용만 방문자에게 전달합니다. 병명을 짐작하거나 복용법을 스스로 만들지 않습니다. 수어 안내만으로 복약지도 의무가 대신되지는 않습니다.

완료 화면. 큰 QR과 48시간 동안 다시 볼 수 있습니다, 볼 수 있는 기한만 표시됩니다. 방문자에게 이 화면을 그대로 보여 주시면 됩니다.

시연 멘트

“휴대전화로 이 QR을 촬영하시면 집에서도 같은 안내를 48시간 동안 다시 보실 수 있고, 그 뒤에는 자동으로 지워집니다. QR 주소에는 이름이나 복약정보가 들어가지 않습니다.”

버튼	기능
다시보기 화면 열어보기	방문자가 QR로 보게 될 화면을 이 자리에서 바로 열어 봅니다. 파일로 여는 데모에서는 이 버튼으로 시연해 주세요.
QR 사용 중지	발급한 QR을 즉시 못 쓰게 만들고 안내 내용도 지웁니다.

파일로 열었을 때 QR 스캔이 안 되는 이유

파일로 실행하면 QR에 담기는 주소가 그 컴퓨터 안의 파일 경로입니다. 휴대전화로 스캔해도 그 경로를 찾을 수 없어 열리지 않습니다. 시연에서는 **다시보기 화면 열어보기**로 같은 화면을 보여 주세요. 휴대전화 스캔까지 시연하려면 인터넷 주소(https)로 배포해야 합니다.



방문자가 QR로 보게 되는 다시보기 화면. 약사님이 보낸 같은 안내만 다시 볼 수 있고, 남은 시간이 위쪽에 표시됩니다.

완료 화면의 [다른 약봉투 예시 해보기](#) 또는 처음 화면의 [약봉투 예시 목록 보기](#)로 예시 목록에 갑니다. 해본 예시에는 **해봤어요** 표시가 붙습니다.

예시	보여 드릴 수 있는 것
감기 (일반 약봉투)	다 읽혀서 바로 안내까지 진행되는 기본 흐름
표 인쇄 (표로 인쇄된 약봉투)	약품별로 표에 적힌 실제 양식, 단위와 먹는 시점을 약사님이 확인해야 하는 흐름
통증 (증상 있을 때 먹는 약)	정해진 시간에 먹는 약과 따로 안내하는 흐름
사진 흐름 (흐리게 찍힌 약봉투)	다시 찍어야 하는 흐름
불면 (빛이 반사된 약봉투)	하루 몇 번이 잘 안 읽혀 고쳐야 하는 흐름
손글씨 (손으로 적은 약봉투)	글자를 거의 못 읽어 처음부터 직접 입력하는 흐름

1 약봉투 읽기 2 내용 확인 3 안내 문장 4 수어 안내 5 완료

다른 약봉투 예시도 해보세요

약봉투는 약국마다 양식이 다릅니다. 잘 읽히는 약봉투부터 글자를 거의 읽지 못하는 약봉투까지, 각각 어떻게 안내가 만들어지는지 차례로 보실 수 있습니다.

	간기 일반 약봉투 한 번에 1포 · 하루 3번 · 3일 동안 · 식후 30분 ✓ 바로 안내까지 진행되는 흐름	이 예시로 해보기
	표 인쇄 표로 인쇄된 약봉투 약물별로 표에 적힌 약봉투 · 단위와 먹는 시점은 확인 필요 ! 약사가 직접 확인·입력하는 흐름	이 예시로 해보기
	통증 증상 있을 때 먹는 약봉투 증상 있을 때만 한 알 · 다른 약과 따로 안내 ✓ 바로 안내까지 진행되는 흐름	이 예시로 해보기
	손글씨 손으로 적은 약봉투 글자를 거의 읽지 못해 복약정보를 직접 입력하는 경우 ! 약사가 직접 확인·입력하는 흐름	이 예시로 해보기
	사진 흐림 흐리게 찍힌 약봉투 글자가 흐려 다시 찍어야 하는 경우 ! 약사가 직접 확인·입력하는 흐름	이 예시로 해보기
	불편 빛이 반사된 약봉투 하루 몇 번이 잘 안 읽힘 · 고쳐서 진행 ! 약사가 직접 확인·입력하는 흐름	이 예시로 해보기

어떤 예시를 고르든 읽기 → 확인 → 안내 문장 → 수어영상 → 완료 순서는 같습니다. 글자를 읽지 못한 약봉투는 확인 화면에서 직접 입력해 같은 안내를 만들 수 있습니다.

[처음 화면으로](#)

이 서비스는 약사님이 확인하고 보낸 내용만 방문자에게 전달합니다. 병명을 짐작하거나 복용법을 스스로 만들지 않습니다. 수어 안내만으로 복약지도 의무가 대신되지는 않습니다.

약봉투 예시 목록. 각 예시를 눌러 같은 흐름을 이어서 시연할 수 있습니다.

사례 A — 표로 인쇄된 약봉투

요즘 많이 쓰는 실제 양식입니다. 약품별로 1회 투여량 / 1일 횟수 / 투약일수가 표에 적혀 있고, 복용시점은 체크 형태로 인쇄됩니다.

수어 복약지도

서울 열린약국

시연용 예시

약봉투 읽기 예시

수어영상 예시

1 약봉투 읽기

2 내용 확인

3 안내 문장

4 수어 안내

5 완료

약봉투를 촬영하면 복약정보를 읽어옵니다

약봉투를 카운터에 놓고 촬영하면 한 번에 먹는 양과 하루 몇 번, 며칠 동안, 언제 먹는지를 자동으로 읽어옵니다. 아래는 표 인쇄 · 표로 인쇄된 약봉투 예시로 보여드리는 결과입니다.

약봉투 스캔 화면

표 인쇄

시연용 약봉투 스캔 결과(예시)

3개 항목을 읽었어요

조 제 약

환자 김OO
조제일 2026-09-21 조제번호 2026-0921-0007 서울 열린약국

의약품명	1회 투여량	1일 횟수	투약일수
시연용 A정	1.00	3	3
시연용 B캡슐	1.00	3	3
시연용 C정	0.50	3	3

매 식 전 · 간 · 후 시 분 복용
일본 / 회분 (복용시점은 약국에서 표시)

주의 줄음이 올 수 있음

※ 시연용 가상 약봉투입니다. 실제 의약품이나 처방이 아닙니다.
대한약사회 공용플랫폼 수어 복약지도 데모

이렇게 진행됩니다

1. 읽은 내용 확인 — 약봉투와 비교해 고칠 곳을 고칩니다

2. 안내 문장 고르기 — 방문자에게 보여줄 문장을 정합니다

3. 수어영상 보기 — 문장마다 수어영상과 자막이 함께 재생됩니다

4. 안내 마치기 — 48시간 동안 다시 볼 수 있는 QR을 드립니다

안내 내용 확인하기 →

다른 약봉투 예시로 바꾸기

약봉투에 적힌 내용만 사용합니다. 병명으로 복용법을 짐작하거나 없는 정보를 만들지 않습니다.

약봉투에서 읽은 내용

한 번에 먹는 양

하루 몇 번

며칠 동안

언제 먹는지

1 ✓ 잘 읽혔어요 94%

3번 ✓ 잘 읽혔어요 93%

3일 ✓ 잘 읽혔어요 92%

못 읽었어요 % 직접 입력

! 표 안의 작은 숫자를 약봉투와 꼭 비교해 주세요

× 잘 읽히지 않은 항목이 있습니다. 다음 화면에서 직접 확인하고 고쳐 주세요.

▶ 실제 약봉투 사진으로 해보기

약봉투 1장 · 표 인쇄 예시

안내 내용 확인하기 →

이 서비스는 약사님이 확인하고 보낸 내용만 방문자에게 전달합니다. 병명을 짐작하거나 복용법을 스스로 만들지 않습니다. 수어 안내만으로 복약지도 의무가 대신되지는 않습니다.

표 양식 읽기 결과. 약품 3개를 각각 읽어옵니다.

수어 복약지도
서울 열린약국
시연용 예시
약봉투 읽기 예시
수어영상 예시

약봉투 읽기
2 내용 확인
3 안내 문장
4 수어 안내
5 완료

읽은 내용을 확인해 주세요

빨간색·노란색 항목을 약봉투와 비교해 주세요. 항목을 누르면 약봉투에서 그 부분을 표시해 드리고, 모든 값은 직접 고칠 수 있습니다.

표로 인쇄된 약봉투
표 인쇄
! 조금 호려요

사진 상태 · 흐림 18% · 빛 번사 12%

조 제 약

이름은 가립니다

조제일 2026-09-21 조제번호 2026-0921-0007 서울 열린약국

의약품명	1회 투여량	1일 횟수	투약일수
시연용 A정	1.00	3	3
시연용 B캡슐	1.00	3	3
시연용 C정	0.50	3	3

매 식 전 · 간 · 후 ____ 시 ____ 분 복용
일분 / 회분 (복용시점은 약국에서 표시)

주의 줄음이 올 수 있음

※ 시연용 가상 약봉투입니다. 실제 의약품이나 처방이 아닙니다.
대한약사회 공용플랫폼 수어 복약지도 데모

! 표 안의 작은 숫자를 약봉투와 꼭 비교해 주세요

▶ 약봉투에서 읽은 글자 보기

정해진 시간에 먹는 약
시연용 A정

약품명
잘 읽혔어요 92%
약봉투와 같아요

시연용 A정

약봉투 표기 시연용 A정

한 번에 먹는 양 *
잘 읽혔어요 94%
약봉투와 같아요

1

약봉투 표기 1.00 → 1

단위 (정·포 등) *
직접 입력

약봉투를 보고 입력해 주세요

약봉투에서 찾지 못한 항목입니다

하루 몇 번 *
잘 읽혔어요 93%
약봉투와 같아요

3

× 확인이 필요한 항목 6개 · 한 번 봐주실 항목 2개

← 이전으로
다음 · 안내 문장 만들기 →

확인 화면(첫 화면). 표에는 정·포 같은 단위가 적혀 있지 않아 읽지 않고 비워 둡니다. 임의로 짐작하지 않고 약사님이 고르게 합니다. 먹는 시점도 체크 표시만 있어 후보를 제시하고 약사님이 선택합니다. 아래로 내리면 약품 3개가 각각 표시됩니다.

시연 멘트

“없는 정보를 만들어 내지 않는 것이 이 서비스의 원칙입니다. 표에 단위가 없으면 비워 두고 약사님께 물어봅니다.”

사례 B — 손으로 적은 약봉투

글자를 거의 읽지 못하는 경우입니다. 복약정보를 **처음부터 직접 입력**해 안내를 만들어 갑니다.

수어 복약지도

서울 열린약국

시연용 예시

약봉투 읽기 예시

수어영상 예시

1 약봉투 읽기

2 내용 확인

3 안내 문장

4 수어 안내

5 완료

약봉투를 촬영하면 복약정보를 읽어옵니다

약봉투를 카운터에 놓고 촬영하면 한 번에 먹는 양과 하루 몇 번, 며칠 동안, 언제 먹는지를 자동으로 읽어옵니다. 아래는 손글씨 · 손으로 적은 약봉투 예시로 보여드리는 결과입니다.

약봉투 스캔 화면

손글씨

시연용 약봉투 스캔 결과(예시)

약봉투를 찍었어요

행복한약국

☎ 02-000-0000

성명 김○○

조제일 9/21

1회 1 포(정) 1일 3 회

총 5 일분 식후 · 식전 30 분

주의사항

줄릴 수 있어요

물 많이 드세요

※ 시연용 예시 약봉투입니다. 실제 의약품이나 처방이 아닙니다.
손으로 적은 약봉투는 글자를 읽지 못할 수 있습니다.

약봉투에서 읽은 내용

한 번에 먹는 양

하루 몇 번

며칠 동안

언제 먹는지

못 읽었어요 직접 입력

못 읽었어요 직접 입력

못 읽었어요 직접 입력

못 읽었어요 직접 입력

! 손으로 적은 글자는 읽지 못했습니다. 복약정보를 직접 입력해 주세요

× 글자를 읽지 못했습니다. 다음 화면에서 약봉투를 보고 직접 입력해 주세요. 직접 입력해도 같은 방식으로 수어 안내를 만들 수 있습니다.

▶ 실제 약봉투 사진으로 해보기

이렇게 진행됩니다

1. 읽은 내용 확인 — 약봉투와 비교해 고칠 곳을 고칩니다

2. 안내 문장 고르기 — 방문자에게 보여줄 문장을 정합니다

3. 수어영상 보기 — 문장마다 수어영상과 자막이 함께 재생됩니다

4. 안내 마치기 — 48시간 동안 다시 볼 수 있는 QR을 드립니다

안내 내용 확인하기 →

다른 약봉투 예시로 바꾸기

약봉투에 적힌 내용만 사용합니다. 병명으로 복용법을 짐작하거나 없는 정보를 만들지 않습니다.

약봉투 1장 · 손글씨 예시

안내 내용 확인하기 →

이 서비스는 약사님이 확인하고 보낸 내용만 방문자에게 전달합니다. 병명을 짐작하거나 복용법을 스스로 만들지 않습니다. 수어 안내만으로 복약지도 의무가 대신되지는 않습니다.

손글씨 약봉투 읽기 결과. 읽지 못했다는 안내가 나옵니다.

읽은 내용을 확인해 주세요

빨간색·노란색 항목을 약봉투와 비교해 주세요. 항목을 누르면 약봉투에서 그 부분을 표시해 드리고, 모든 값은 직접 고칠 수 있습니다.

손으로 적은 약봉투 손글씨 ! 조금 흐려요 사진 상태 · 호림 34% · 빛 반사 8%

행복한약국 ☎ 02-000-0000

성명 이름은 가립니다

조제일 9/21

1회 1 포(정) 1일 3 회

총 5 일분 식후 · 식전 30 분

주 의사향

즐릴 수 있어요
물 많이 드세요

※ 시연용 예시 약봉투입니다. 실제 의약품이나 처방이 아닙니다.
손으로 적은 약봉투는 글자를 읽지 못할 수 있습니다.

! 손으로 적은 글자는 읽지 못했습니다. 복약정보를 직접 입력해 주세요

▶ 약봉투에서 읽은 글자 보기

정해진 시간에 먹는 약

약품명 직접 입력

약봉투를 보고 입력해 주세요

약봉투에서 찾지 못한 항목입니다

한 번에 먹는 양 * 직접 입력

약봉투를 보고 입력해 주세요

약봉투에서 찾지 못한 항목입니다

단위 (정·포 등) * 직접 입력

약봉투를 보고 입력해 주세요

약봉투에서 찾지 못한 항목입니다

하루 몇 번 * 직접 입력

약봉투를 보고 입력해 주세요

약봉투에서 찾지 못한 항목입니다

며칠 동안 * 직접 입력

약봉투를 보고 입력해 주세요

약봉투에서 찾지 못한 항목입니다

언제 먹는지 * 직접 입력

약봉투에 보지만 인쇄되어 있어 무엇이 표시됐는지 읽을 수 없습니다. 약봉투에 표시된 것을 골라 주세요.

식후 30분 식후 식전 30분 식전

복용시점 선택

약봉투에서 찾지 못한 항목입니다

확인할 항목

- ! 손으로 적은 글자는 읽지 못했습니다. 복약정보를 직접 입력해 주세요**
- × 한 번에 먹는 양을(를) 약봉투를 보고 입력해 주세요.
- × 단위 (정·포 등)을(를) 약봉투를 보고 입력해 주세요.
- × 하루 몇 번을(를) 약봉투를 보고 입력해 주세요.
- × 며칠 동안(를) 약봉투를 보고 입력해 주세요.
- × 언제 먹는지를(를) 약봉투를 보고 입력해 주세요.
- ! 약품명이 적혀 있지 않은 약봉투입니다. 먹는 방법만 안내합니다.**

× 확인이 필요한 항목 5개 · 한 번 봐주실 항목 2개

← 이전으로

다음 · 안내 문장 만들기 →

이 서비스는 약사님이 확인하고 보낸 내용만 방문자에게 전달합니다. 병명을 짐작하거나 복용법을 스스로 만들지 않습니다. 수어 안내만으로 복약지도 의무가 대신되지는 않습니다.

확인 화면. 모든 항목이 직접 입력으로 표시됩니다. 직접 입력해도 이후 흐름(안내 문장 → 수어영상 → QR)은 똑같이 진행됩니다.

사례 C — 흐리게 찍힌 약봉투

수어 복약지도

서울 열린약국

△ 시연용 예시

약봉투 읽기 예시

수어영상 예시

1 약봉투 읽기

2 내용 확인

3 안내 문장

4 수어 안내

5 완료

약봉투를 촬영하면 복약정보를 읽어줍니다

약봉투를 카운터에 놓고 촬영하면 한 번에 먹는 양과 하루 몇 번, 며칠 동안, 언제 먹는지를 자동으로 읽어줍니다. 아래는 사진 흐름 · 흐리게 찍힌 약봉투 예시로 보여드리는 결과입니다.

약봉투 스캔 화면

사진 흐름

△ 시연용 약봉투 스캔 결과(예시)

이렇게 진행됩니다

1. 읽은 내용 확인 — 약봉투와 비교해 고칠 곳을 고칩니다

2. 안내 문장 고르기 — 방문자에게 보여줄 문장을 정합니다

3. 수어영상 보기 — 문장마다 수어영상과 자막이 함께 재생됩니다

4. 안내 마치기 — 48시간 동안 다시 볼 수 있는 QR을 드립니다

안내 내용 확인하기 →

다른 약봉투 예시로 바꾸기

약봉투에 적힌 내용만 사용합니다. 병명으로 복용법을 짐작하거나 없는 정보를 만들지 않습니다.

약봉투에서 읽은 내용

한 번에 먹는 양

하루 몇 번

며칠 동안

언제 먹는지

못 읽었어요

직접 입력

× 글자가 선명하지 않습니다 카메라를 고정하고 다시 촬영해 주세요

× 글자를 읽지 못했습니다. 다음 화면에서 약봉투를 보고 직접 입력해 주세요. 직접 입력해도 같은 방식으로 수어 안내를 만들 수 있습니다.

▶ 실제 약봉투 사진으로 해보기

약봉투 1장 · 사진 흐름 예시

안내 내용 확인하기 →

이 서비스는 약사님이 확인하고 보낸 내용만 방문자에게 전달합니다. 병명을 짐작하거나 복용법을 스스로 만들지 않습니다. 수어 안내만으로 복약지도 의무가 대신되지는 않습니다.

흐린 사진. 글자가 선명하지 않습니다 · 카메라를 고정하고 다시 촬영해 주세요 안내가 나오고, 잘못된 값으로 진행되지 않도록 막습니다.

실물 약봉투 없이도 진짜 촬영하는 장면을 보여 드릴 수 있습니다.

준비

1. 처음 화면에서 **약봉투 예시 인쇄하기** 를 누릅니다.
2. 함께 보여줄 예시를 고르고 **인쇄하기** 를 누릅니다.
3. **A4 용지에 배울 100%**로 인쇄해 카운터에 놓습니다.

폴더의 **samples/bag-table.png** (표 양식)이나 **samples/bag-regular.png** (라벨 양식)을 직접 인쇄하셔도 됩니다.

약봉투 예시 인쇄

A4 용지에 100퍼센트 크기로 인쇄해 카운터에 놓고 직접 촬영해 보실 수 있습니다. 스캔 화면에서 함께 보여줄 약봉투 예시를 먼저 골라 주세요.

인쇄하기

처음 화면으로

△ 인쇄물은 시연용 예시 약봉투입니다. 실제 의약품이나 처방이 아닙니다.

감기 · 일반 약봉투 · SAMPLE_BAG_1

서울 열린약국

환자 김OO

조제일 2026년 9월 21일

시연용 A정 시연용 B캡슐 시연용 C정

1회 복용량

1회 1포

복용기간

3일분

1일 복용횟수

1일 3회

복용시점

식후 30분

조이 조으이 오스 이으

인쇄 화면. 아래로 내리면 예시 6종이 인쇄용으로 나열됩니다. 인쇄물에는 시연용 예시임을 밝히는 문구가 함께 인쇄됩니다.

촬영해서 넣기

1단계 화면 아래 **실제 약봉투 사진으로 해보기**를 펼칩니다. 먼저 **촬영 이미지에 적용할 시연 케이스**를 지정한 뒤 진행합니다.

기기	방법
휴대전화 · 태블릿	 휴대기기 카메라로 촬영 → 카메라 앱이 열리고 인쇄물을 촬영하면 그 사진이 약봉투 자리에 들어갑니다.
PC	 사진 불러오기 → 미리 찍어 둔 사진을 선택합니다.

촬영한 사진이 원문 이미지로 들어가고, 지정한 케이스의 인식 결과가 적용되어 **실제로 읽은 것처럼** 다음 단계로 이어집니다.

카메라 미리보기가 켜지지 않는 이유

브라우저는 보안 정책상 카메라 미리보기를 **https 주소 또는 localhost에서만** 허용합니다. 파일로 열면 차단되므로, 위의 **휴대기기 카메라로 촬영** 또는 **사진 불러오기**를 사용해 주세요. 실제 카메라 미리보기가 필요하면 인터넷 주소(https)로 배포해 접속해야 합니다.

7 화면 크기와 기기

기기 종류가 아니라 브라우저 창의 너비를 기준으로 화면이 바뀝니다. 창 크기를 조절하면 즉시 반영됩니다.

창 너비	화면 구성
900px 이상	2열 — 왼쪽 문장 목록, 오른쪽 방문자 자막이 나란히 보입니다. 패드 가로 · PC
900px 미만	1열 — 위아래로 이어서 보입니다. 패드 세로 · 휴대전화

기기	해상도	결과
아이패드 10.2 가로	1080 × 810	2열
아이패드 10.2 세로	810 × 1080	1열
갤럭시탭 가로	1280 × 800	2열
아이폰 세로	390 × 844	1열

어느 크기에서도 가로 스크롤은 생기지 않고, 버튼 높이는 48px 이상으로 유지됩니다.

시연 팁

왼쪽 문장 목록과 오른쪽 자막이 나란히 보이는 **2열 화면**을 보여 드리려면 **패드를 가로로 돌려서** 시연하세요. 세로로 들면 1열로 바뀝니다.

수어 복약지도
서울 열린약국
시연용 예시
약봉투 읽기 예시

수어영상 예시

1 약봉투 읽기
2 내용 확인
3 안내 문장
4 수어 안내
5 완료

약봉투를 촬영하면 복약정보를 읽어옵니다

약봉투를 카운터에 놓고 촬영하면 한 번에 먹는 양과 하루 몇 번, 며칠 동안, 언제 먹는지를 자동으로 읽어옵니다. 아래는 감기·일반 약봉투 예시로 보여드리는 결과입니다.

약봉투 스캔 화면
감기
시연용 약봉투 스캔 결과(예시)

서울 열린약국

약봉투를 다 읽었어요

환자 김OO
조제일 2026년 9월 21일
시연용 A정 시연용 B캡슐 시연용 C정

1회 복용량	1일 복용횟수
1회 1포	1일 3회
복용기간	복용시간
3일간	식후 30분

주의 줄음이 올 수 있음

※ 시연용 가상 약봉투입니다. 실제 의약품이나 치방이 아닙니다.
대한약사회 공동출판물 수어 복약지도 데모

약봉투에서 읽은 내용

한 번에 먹는 양

1포

✓ 잘 읽혔어요 97%

하루 몇 번

3번

✓ 잘 읽혔어요 95%

며칠 동안

3일

! 한 번 확인 82%

언제 먹는지

식후 30분

✓ 잘 읽혔어요 91%

약봉투 1장 · 감기 예시

안내 내용 확인하기 →

휴대전화 세로 화면(1열). 같은 내용이 위아래로 이어집니다.

약 3분 분량입니다. 화면 순서에 맞춰 그대로 읽으셔도 됩니다.

여는 말

“농인 분들이 약국에서 가장 어려워하시는 건 복약지도입니다. 글로 적어 드려도 한국어 문법과 수어 문법이 달라서 정확히 전달되지 않습니다. 이 서비스는 약봉투를 촬영해서 복약정보를 읽고, 약사님이 확인한 내용만 수어영상으로 보여 드립니다.”

1단계에서

“약봉투를 카운터에 놓고 촬영하면 한 번에 먹는 양, 하루 몇 번, 며칠 동안, 언제 먹는지를 읽어옵니다. 항목마다 얼마나 또렷하게 읽었는지 함께 보여 드립니다.”

2단계에서

“여기가 이 서비스의 핵심입니다. 읽어온 내용을 약사님이 약봉투와 비교해 확인하십니다. 항목을 누르면 약봉투에서 그 위치를 표시해 드려서 대조하기 쉽습니다. 잘 읽지 못한 항목은 고치지 않으면 다음으로 넘어가지 않습니다.”

3단계에서

“읽어온 정보로 안내 문장이 만들어집니다. 순서를 바꾸거나 뺄 수 있습니다. 그리고 약봉투에는 없지만 약사님의 지식으로 덧붙이실 안내 — 예를 들어 졸릴 수 있으니 운전을 삼가라는 안내 — 를 여기서 추가하실 수 있습니다. 검수된 문장 27개에서 고르거나, 직접 쓰시면 그 문장에 맞는 수어영상을 새로 만들어 붙입니다.”

4단계에서

“약사님이 확인하신 내용만 방문자 화면으로 넘어갑니다. 문장마다 수어영상과 한국어 자막이 함께 나오고, 방문자가 따라오기 어려우면 천천히 버튼으로 속도를 줄일 수 있습니다.”

5단계에서

“약국에서 한 번 보고 나가시면 집에서 잊어버리십니다. 그래서 QR을 드립니다. 휴대전화로 촬영하시면 48시간 동안 같은 안내를 다시 보실 수 있고, 그 뒤에는 자동으로 지워집니다. QR 주소에는 이름이나 복약정보가 들어가지 않습니다.”

맺는 말

“이 서비스는 병명을 짐작하거나 복용법을 스스로 만들지 않습니다. 약봉투에 적힌 내용과 약사님이 확인·추가한 내용만 전달합니다. 수어 안내만으로 복약지도 의무가 대신되는 것도 아닙니다. 약사님의 복약지도를 농인 방문자에게 정확히 전달하는 도구입니다.”

증상	해결 방법
수어영상이 나오지 않고 그림 아바타가 나온다	그 기기의 브라우저가 mp4를 재생할 수 없는 경우입니다. 자동으로 그림 아바타와 수어 순서 표시로 바뀌어 흐름은 그대로 진행됩니다. Chrome 또는 Edge로 열어 보세요.
약봉투 이미지나 수어영상이 안 보인다	<code>index.html</code> 만 따로 옮기지 않았는지 확인해 주세요. 같은 폴더에 <code>avatar-samples</code> 와 <code>samples</code> 가 있어야 합니다. ZIP 안에서 바로 열었을 때도 같은 증상이 납니다.
카메라 켜기를 눌러도 카메라가 안 켜진다	브라우저 보안 정책 때문입니다(6장 참고). 휴대기기 카메라로 촬영 또는 사진 불러오기 를 사용해 주세요.
QR을 휴대전화로 찍어도 열리지 않는다	파일로 열었을 때는 정상입니다(5단계 참고). 다시보기 화면 열어보기 로 같은 화면을 보여 주세요.
수어영상 보기 가 눌리지 않는 것 같다	오른쪽 약봉투 내용과 위 문장을 확인했습니다 체크가 필요합니다. 안내창의 확인란으로 이동 을 누르면 그 자리로 이동합니다.
다음 단계로 넘어가지지 않는다	2단계에 빨간색 항목이 남아 있는지 확인해 주세요. 화면 아래 표시줄에 확인이 필요한 항목 n개 로 개수가 나옵니다.
글씨가 너무 작거나 크다	브라우저에서 Ctrl + + / - (Mac은 *)로 조절하세요.
진행하던 내용이 사라졌다	브라우저를 닫으면 세션과 QR 정보가 사라집니다. 파일로 여는 데모의 특성입니다. 처음부터 다시 시작해 주세요.

시연에서 질문을 받으실 때 정확하게 답하실 수 있도록, 이 데모가 **아직 하지 못하는 것**을 정리했습니다.

반드시 함께 안내해 주세요

1. **수어영상은 시연용 샘플입니다.** 자막 내용과 일치하지 않습니다. 화면에도 그 안내가 표시됩니다. 실제 서비스에서는 승인된 문장에 맞는 수어가 생성됩니다.
2. **수어 표현 순서는 검수 전 초안입니다.** 실제 운영에는 수어 전문가와 농인 자문단의 검수를 거친 문구만 사용됩니다.
3. **OCR 정확도는 실제 약봉투로 검증되지 않았습니다.** 화면의 정확도 수치는 시연용 예시값입니다.
4. **수어 안내만으로 법정 복약지도 의무가 대신되지 않습니다.** 약사님의 복약지도를 정확히 전달하는 보조 도구입니다.
5. **병명을 짐작하거나 복용법을 스스로 만들지 않습니다.** 약봉투에 적힌 내용과 약사님이 확인·추가한 내용만 전달합니다.
6. **기존 약국 시스템과 연동하지 않습니다.** 약봉투를 촬영해서 읽는 방식이므로 조제 시스템을 건드리지 않습니다.

개인정보 처리

항목	처리 방식
약봉투 사진	안내 중에만 사용하고 저장하지 않습니다.
방문자 개인정보	받지도, 저장하지도 않습니다.
QR 주소	이름이나 복약정보가 들어가지 않습니다.
안내 내용	48시간 동안만 보관하고 자동으로 지웁니다.

문의

케이엘큐브(KLcube) 전략기획실

이 문서와 데모는 대한약사회 소개를 위한 시연용 자료입니다.